



移動用リフトの選び方




移動用リフトは使用場所と使用目的の確認をしましょう。

また使い場所により座位保持が可能かどうかという身体機能でリフトの使い分けをすることがあります。座位バランスはいいが立ち上がりが困難なのか、座位保持が困難なのかをまず確認するようにしましょう。

<設置場所>

屋外 屋内 浴室

移動用リフトの種類と特長

自立 ↑	<p>屋外で</p> <p>外から中へ。中から外へ。段差がある場所でも車椅子に乗ったまま安全に移動できます。</p>	<p>居室で</p> <p>床や椅子からの立ち座りや移乗の動作をサポートします。</p> <p>ベッドから車椅子やポータブルトイレへの移乗など、居室や寝室での利用に。</p>	<p>浴室で</p> <p>滑りやすく事故の危険性が高い浴室や浴槽への出入りを、より安全にスムーズに。</p>
	<p>車椅子に乗ったままの移動に</p>  <p>UD-320CS UD-320CL</p>	<p>床や椅子からの立ち座りに</p>  <p>エコライト</p>	<p>ベッドからの離床や室内での移動に</p>  <p>Hug L1-01 マイティライトⅢ</p> <p>つるべBセット</p>
全介助 ↓			

つり具の種類と特長

介護保険対象購入品

リフトの種類により専用のつり具が必要です。移動用リフトのつり具とは、リフトを使用するとき身体を包み込んで持ち上げる部分です。身体機能、使用場面、介護者の状況などに応じて種類を選択する必要があります。



ハーフサイズシート

からだ比較的安定して座位がとれる方に。



フルサイズシート

座位が安定していない方に。からだ全体をしっかり包みます。



ベルト型シート

装着が簡単。取扱いやすいタイプです。



トイレ用シート

臀部が大きく開いています。下着の着脱に便利です。

※ご利用になるリフトの種類によって対応するつり具が異なります。各移動用リフトごとに適したつり具をお選びください。つり具の選択についてはグリーンケア取扱店にご相談ください。


移乗サポートロボット Hug L1-01

屋内 非課税

FUJI

軽量でコンパクト、スリングシートが不要です。

Hug
移乗サポートロボット Hug

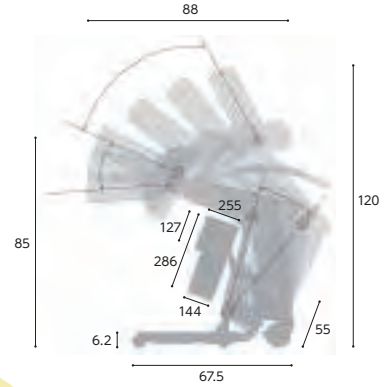

準備・操作が簡単

使いたいときに
サッと準備
どなたでも簡単操作

コンパクト

軽量化実現!
狭い場所でも使える
スリムなボディ
移動もらくらく

安心・安全

Hugが体を
しっかりとサポート
100kgの方まで
軽々移乗



① Hugに寄りかかる

Hugを近づけ身体を寄せます。スリングシートなどは不要なため、準備に時間がかかりません。



② 上体を起こす

簡単リモコン操作でHugがやさしく、抱えあげます。100kgの方でも安心して利用できます。



③ 便座に座る

お手洗いや車椅子へゆっくりと安全に座ることができます。脱衣介助も簡単に行えます。

商品名	商品番号	商品コード
Hug L1-01	22-6065-0	01666-000002
サイズ:全長88×全幅55×全高85~120cm 重さ:30kg 最大使用者体重100kg		
バッテリー/形式:鉛蓄電池 定格電圧:DC24V 充電時間:8時間 最大使用回数:100回(使用環境による)		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

スカイリフト SL-2018

屋内 非課税

アイ・ソネックス

在庫限定品



座奥まで
きっちり座れる!



真っ直ぐ立てる!



六輪で
とり回しがラク!



狭い空間でも
スイスイ!

車椅子へ移乗する時、座の奥まで深く腰かけられるので、座り直しの手間が省け、滑りすわりの防止にも役立ちます。

完全な起立姿勢をとるため胸パットとスリング、膝パットが体幹や足腰を支えます。足底にしっかり体重が乗り、リハビリにつながります。

六輪なので前輪キャスターへの荷重が分散され、軽い力で押し引き操作ができます。小回り性も抜群で、介護者の負担が軽減されます。

スカイリフトの幅は、肩幅くらいの50cm。在宅の狭いトイレ空間でも介護者が便器の横に立って介助できます。

商品名	商品番号	商品コード
SL-2018	22-6041-0	00149-000053
サイズ:幅50.3×奥行96.4×高さ137.3cm 重さ:42kg 耐荷重:100kg		
ご利用者 (1割) 負担額	(2割) 円 (3割) 円	月額レンタル料金 円

使用条件: 移動・移乗

排泄ケアや、車いすへの移乗、入浴介助やリハビリに。小回りの良いスタンディングリフトです。

介護保険
購入
対象品


販売品

情報

バスリフト EWB101RR

浴室

TOTO

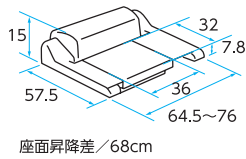


身体機能:端座位可
電動でシートが上下し、浴槽での立ち座りや出入りをサポートします。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101RR	22-0701-1	00187-000111
ご利用可能体重: 35~100kg 充電時間: 50分 (1回の充電で約10往復) バッテリー: DC12V 重さ: 20kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

バスリフト EWB101RR アームレスト乗越えキット付

浴室

TOTO

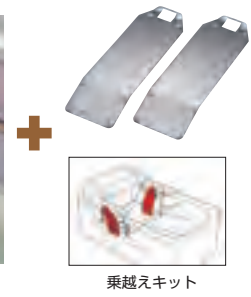

乗越えキット

身体機能:端座位可
浴槽にアームレストが付いている場合はこちらをご利用ください。

商品名	商品番号	商品コード
EWB101RR アームレスト乗越えキット付	22-0702-1	00187-000223
ご利用可能体重: 35~100kg 充電時間: 50分 (1回の充電で約10往復) バッテリー: DC12V 重さ: 20.8kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器


手すり

段差解消機 アルコー6000型

星光医療器製作所



使用条件: 段差移動

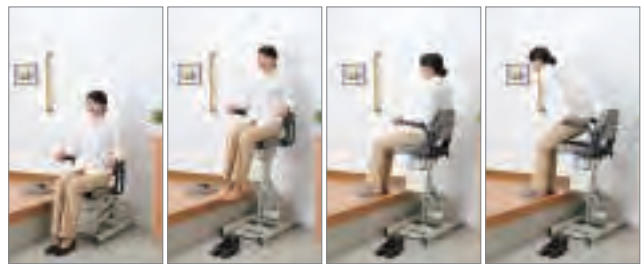

座席回転時の挟み込みや衝突など、外部から負荷が掛かると回転が止まります。また、下降時足など挟み込むと停止し、自動的に上昇する安全構造です。

商品名	商品番号	商品コード
アルコー6000型	22-5928-1	00125-000056
サイズ: 幅 56 × 奥行 66.6 × 高さ 80 ~ 122cm 座面高さ: 44 ~ 86cm		
重さ: 33kg	耐荷重: 100kg	電源: AC100V
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

移動用リフト リーチ

モルテン



使用条件: 段差移動

スロープが置けないスペースにも設置できるコンパクトサイズです。電源不要でフットポンプに付いているペダルを踏むとテーブルが昇降します。

商品名	商品番号	商品コード
ショートタイプ	22-5931-1	00054-000170
サイズ: 全幅 100・107・114 × 奥行 110cm テーブルサイズ: 全幅 76・83・90 × 奥行 110 × 高さ 8 ~ 40cm		
重さ: 62kg 最大上昇荷重: 100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

商品名	商品番号	商品コード
ロングタイプ	22-5932-1	00054-000171
サイズ: 全幅 100・107・114 × 奥行 125cm テーブルサイズ: 全幅 76・83・90 × 奥行 125 × 高さ 8 ~ 40cm		
重さ: 65kg 最大上昇荷重: 100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	月額レンタル料金 円
	(3割) 円	

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



独立宣言エコライト DSERA

コムラ製作所

屋内


床ずれ
防止用具

昇降座椅子のスタンダードモデルです。アームレスト跳ね上げ式。


体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

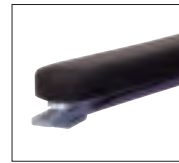

肘掛け先端の大型レバーを上へ引けばアップ、下へ押せばダウン。

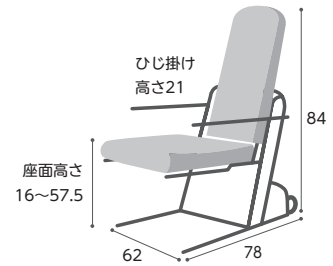

使用条件：立ち上がり

商品名	商品番号	商品コード
DSERA	22-5744-1	00088-000012
重さ：36kg 耐荷重：100kg 使用電源：AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		円

独立宣言ローザ・コンパクトシート DSRS-C

コムラ製作所

屋内

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具



上下ストロークは59.5cm。座板高さは1.5～61cmまで高さ調節可能。アームレストは跳ね上げできるので、ベッド・車椅子への移乗にも利用できます。

使用条件：立ち上がり

商品名	商品番号	商品コード
DSRS-C	22-5833-1	00088-000022
サイズ：幅 55 × 奥行 81 × 高さ 97.5cm 座面高さ：1.5 ~ 61cm		
重さ：42kg 耐荷重：80kg (座面) 使用電源：AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		円

電動昇降座椅子独立宣言ツイスト

コムラ製作所

屋内

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



起立・着座がしやすい、座椅子の電動昇降機能と回転機能付。

使用条件：立ち上がり

商品名	商品番号	商品コード
DSTPA	22-5735-1	00088-000014
サイズ：幅 64.5 × 奥行 82.5 × 高さ 94cm 座面高さ：16 ~ 57cm		
重さ：46kg 耐荷重：80kg 使用電源：AC100V		
ご利用者負担額 (1割)	(2割) 円	円
	(3割) 円	円
		円

独立宣言リクライニング DSREC

コムラ製作所



使用条件: 立ち上がり



電動リクライニング機構



電動チルト機構

背もたれが後ろに傾斜する電動リクライニング機構と背もたれと座板と一緒に傾斜する電動ティルト機構が備わっています。

商品名	商品番号	商品コード
DSREC	22-5706-1	00088-000015
サイズ: 幅 66 × 奥行 101.5 × 高さ 95.5cm 座面高さ: 16 ~ 57.5cm		
リクライニング角度: 105° ~ 135° ティルト稼働範囲: 30° 重さ: 45kg 耐荷重: 100kg 使用電源: AC100V		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

屋内

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器


手すり

床走行式リフト マイティライトⅢ

ミクニ ライフ&オート



[手動降下装置]

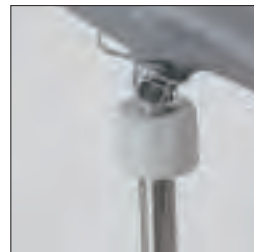


万が一、リモコン操作による上昇降下が出来ない場合、樹脂部を回転させる事で、吊られた人を下ろす事が可能です。

[折りたたみ可能]



工具を使用せずに折りたたむ事が可能です。車内への積込も可能となり、外出先で使用することも可能です。

コンパクトな仕様かつ、6輪キャスター(前輪Wキャスター)で、小回りに優れています。

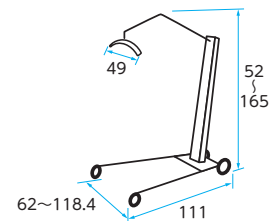

前脚高さが6.1cm。低床ベッドでも使用できるリフトです。手動降下装置、電圧低下時降下機構を装備。

商品名	商品番号	商品コード
マイティライトⅢ	22-5888-0	00139-000027
前脚高さ: 6.1cm 重さ: 34.5kg バッテリー: 電源AC100Vで充電		
前輪: 3.5cm (Wキャスター式) 後輪: 7.5cm (プレーキ付) 耐荷重: 160kg		
ご利用者 負担額 (1割)	(2割) 円 (3割) 円	円 月額レンタル料金 円

屋内 非課税

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報

使用できるベッド: ケア優 ミオレットフォーユー ※1 ※2 楽匠Z 楽匠S ラフィオ

※1 要ハイトスペーサー
※2 超低床仕様不可



移動用リフト・つり具

マイティエースII ベッドセット

ミニ ライフ&オート



使用条件：ベッドからの移動



屋内 非課税

低床ベッドでご利用いただけるように、ベッドサイトのフレームを極限まで低くしたリフトです。ベッドから車椅子やポータブルトイレなどへ移乗するときに使用します。

商品名	商品番号	商品コード
ベッドセット	22-5825-0	00139-000035
サイズ：全幅 171.5 × 奥行 130 × アーム高さ 205cm 昇降ストローク：160cm		
重さ：47kg 電源：AC100V 耐荷重：90Kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

床ずれ
防止用具

体位
変換器


認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

つるべー Bセット (寝室用)

モーター

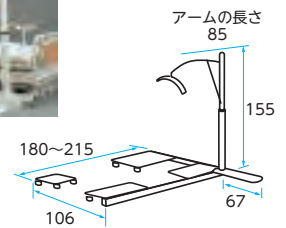

アームが360度回転するため、広い範囲で使用できます。

商品名	商品番号	商品コード
85cm	22-5720-0	00229-000005
本体重さ：51.3kg 電装品重さ：5.1kg 電源：AC100V 耐荷重：100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

使用できるベッド： ケア便 ※1 ミオレット ※1 フォーユー ※1 楽匠 S ※2 ラフィオ ※2
※1 要ハイトスペーサー ※2 超低床仕様不可


介護保険
購入
対象品

販売品

情報

つるべー F2Rセット (浴室用)

モーター

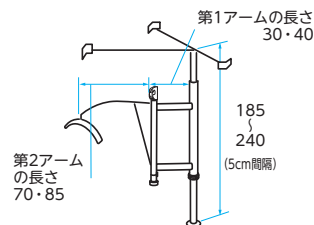

商品名	商品番号	商品コード
第1アーム30cm 第2アーム70cm	22-5725-0	00229-000016
第1アーム30cm 第2アーム85cm	22-5726-0	00229-000016
商品名	商品番号	商品コード
第1アーム40cm 第2アーム70cm	22-5728-0	00229-000016
第1アーム40cm 第2アーム85cm	22-5729-0	00229-000016
本体重さ/ (第1アーム30cm×第2アーム70cm)26.2kg (第1アーム30cm×第2アーム85cm)26.6kg (第1アーム40cm×第2アーム70cm)27kg (第1アーム40cm×第2アーム85cm)27.4kg		
電装品重さ：5.1kg 電源：AC100V 耐荷重：100kg		
ご利用者負担額 (1割)	(2割)	円
	(3割)	円
		円

身体機能：座位困難

浴室 非課税

スリングシート の 使用方法

画像提供元: 株式会社 モリトー

車椅子への着座

1 膝を押す = ブレーキを掛ける

- ① 車椅子のブレーキを掛けます。
- ② 着座直前に、深く座れる位置まで両膝を背中側に押しながらスイッチを操作してください。

2 ティルト・リクライニングの角度を合わせる

- ① 車椅子のブレーキを掛けます。
- ② 対象者の吊り姿勢(角度)に合わせて、ティルト・リクライニングを調整します。
- ③ 深く座れる位置を確認して、スイッチ操作してください。1に同じ。

3 キャスターアップする = ブレーキを解除

- ① 車椅子のブレーキを解除し、前方(後方)よりキャスターをアップします。
- ② スイッチを操作して下降させます。この時、対象者の重さを感じながら徐々に車椅子をもどします。

1



2



転倒防止をしてください。

3-①



3-②



レッグサポートが取り外せる場合は、外してください。

指のはさみに注意してください。車椅子の構造により、困難な場合があります。

床ずれ
防止用具

体位
変換器


認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

ベッド上での使用



エヴァ ハーフタイプ

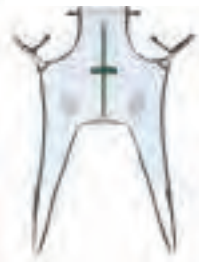

エヴァ フルタイプ

※ 1 エヴァハーフを使用される場合は、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や肩を支えて移乗させてください。エヴァフル、パオメッシュブルーフルは状況により、ベッド操作や首や肩を支えて操作してください。

●ベッドからの移乗

1



ストラップをハンガーに固定し、膝を曲げてリフトを上昇させます。(※ 1)

2



頸部の角度が快適になるように、頭部ストラップの長さを調整し、ヒジや肩を前方に出して、圧迫を取り除き、ゆったりした姿勢をとります。


●ベッドへの移乗

1



最初はつま先を適所にガイドします。(※ 1)

2

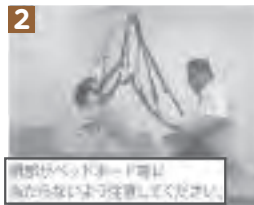

臀部がベッドに着く前に、ベッド上の最適な位置を確認し、降下してください。

3



スリングが取り外せる位置までリフトを降下させます。

●ベッドからの移乗

1



ストラップをハンガーに固定し、リフトを上昇させます。(※ 2)

●ベッドへの移乗

1



着座する前に足の位置を調整します。

2



ハンガーを持ってスリングを外してください。(顔等に当たる場合があります)

3




ネックパットのバックルを外します。

4



側臥位になります。(写真は介助者と反対向き)バックルが体幹に当たらないようにし、体の下に差し込みます。(※ 3)

5

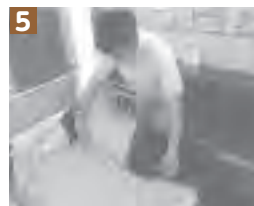

臥位姿勢にし、頭を持ち上げネックパッドを外します。体位変換し、スリングを抜き取ります。

※ 2 状況により、ベッドの背上げとひざ上げを行うか、介助者が首や方を支えて移乗させてください。肩の圧迫や膝裏のしわがあれば取り除いてください。

※ 3 注意: パオメッシュブルーフルは車椅子上での着脱はできません。

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報